




UroBilanz Handbuch

Der klare Leitfaden fuer dein lokales Urin- und Fluessigkeitsprotokoll

UroBilanz hilft dir, lokale Protokolldaten zu ordnen und auszuwerten. Dieses Handbuch erklart jeden sichtbaren Bereich, die wichtigsten Schalter und einen sinnvollen ersten Ablauf.

Deutsch | Stand: Juli 2026

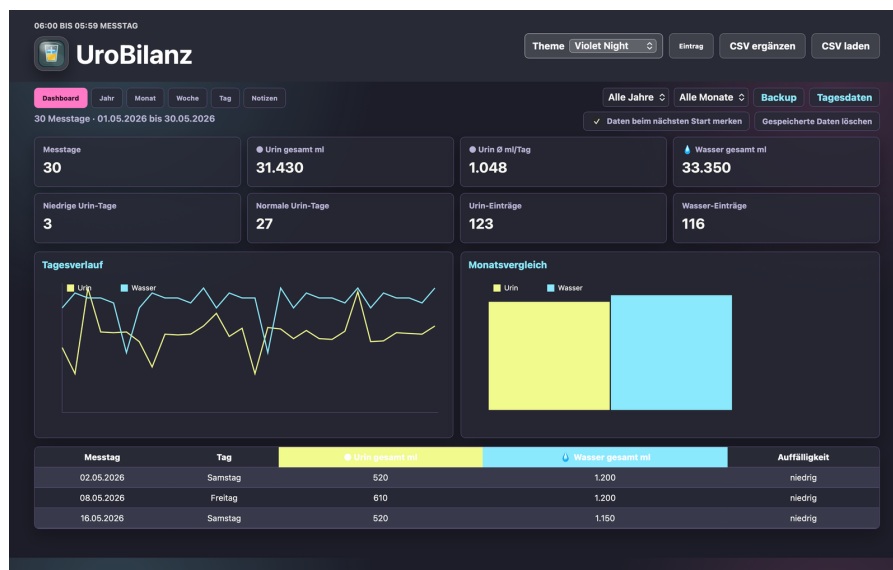

UroBilanz - Web-App mit synthetischen Demo-Daten


Inhalt

1. UroBilanz auf einen Blick
2. Wo finde ich was?
3. Erster sinnvoller Start
4. Eintraege erfassen und verwalten
5. Ansichten und Auswertungsregeln
6. Bericht, Backups und Exporte
7. Themes, Sprache und Einstellungen
8. Datenschutz, KI-Hilfe und Fehlerberichte

1. UroBilanz auf einen Blick

UroBilanz ist ein lokales Protokoll- und Auswertungstool fuer Urin-, Wasser- und Hinweis-Eintraege. Es erstellt keine Diagnose und gibt keine medizinischen Empfehlungen. Die Web-App und die macOS-App verwenden dieselben Grundfunktionen.

- CSV laden: Eine Original-Urinite-CSV oder Tagesdaten-CSV lokal importieren.
- Eintrag: Urin, Wasser oder einen Hinweis manuell erfassen.
- Ansichten: Dashboard sowie Jahr, Monat, Woche, Tag und Regeln vergleichen.
- Sichern: Daten als Backup, Tagesdaten oder JSON lokal exportieren.

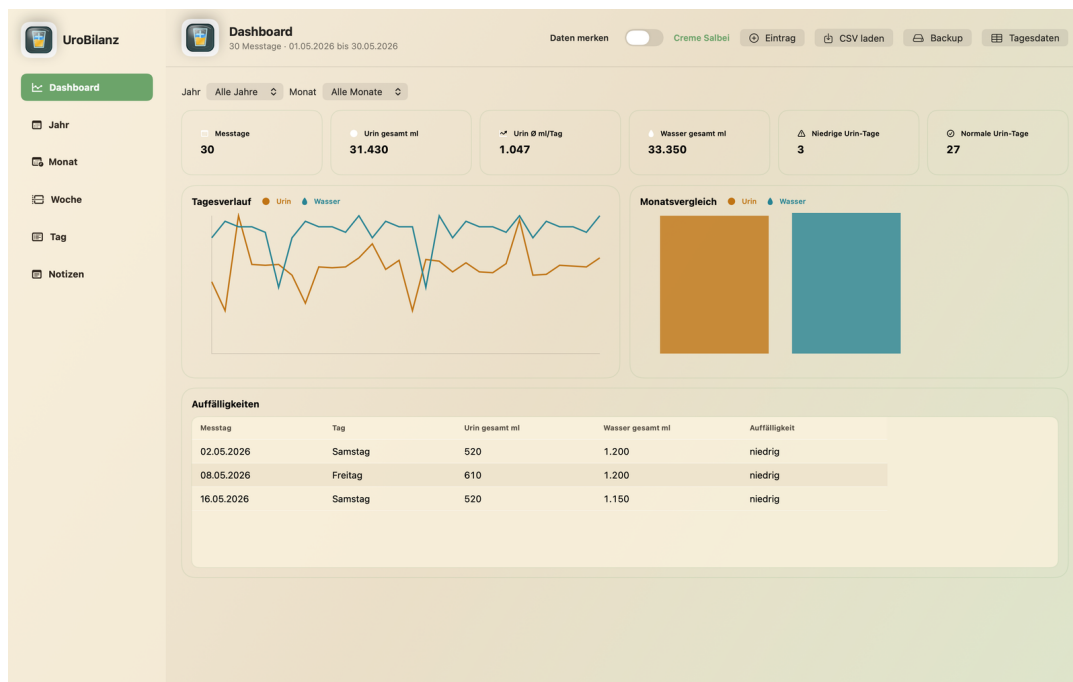

SwiftUI-App mit Demo-Daten

2. Wo finde ich was?

Funktion	Ort und Wirkung
CSV laden	Oben rechts und auch in der leeren Startansicht. Oeffnet einen lokalen Dateidialog; die Datei bleibt auf deinem Geraet.
CSV ergaenzen	Oben rechts. Fuegt neue Eintraege aus einer weiteren Original-Urinite-CSV hinzu und ueberspringt bereits vorhandene Eintraege.
Eintrag	Oben rechts. Oeffnet die manuelle Eingabe fuer Urin, Wasser und Hinweise.
Dashboard / Jahr / Monat / Woche / Tag / Regeln	Register links in der Werkzeugleiste. Sie wechseln nur die lokale Darstellung deiner geladenen Daten.
Jahr und Monat	Filter rechts in der Werkzeugleiste. Begrenzen die angezeigten Tabellen und Diagramme auf den gewaehlten Zeitraum.
Backup	Menue rechts: Komplett-Backup, Tagesbackup oder JSON-Export lokal speichern.
Arztbericht	Rechts in der Werkzeugleiste. Waehlt Zeitraum und Inhalte fuer einen lokalen, druckfreundlichen Bericht.
Daten merken / gespeicherte Daten loeschen	Rechts unter der Werkzeugleiste. Speichert die geladene CSV nur lokal im Browser bzw. in der macOS-App oder entfernt sie wieder.
Theme und Sprache	Oben rechts. Veraendern das Erscheinungsbild beziehungsweise die sichtbare Sprache, nicht die Messdaten.

06:00 BIS 05:59 MESSTAG

UroBilanz

Theme

Violet Night

Eintrag

CSV ergänzen

CSV laden

Dashboard

Jahr

Monat

Woche

Tag

Notizen

Alle Jahre

Alle Monate

Backup

Tagesdaten

30 Messtage - 01.05.2026 bis 30.05.2026

✓ Daten beim nächsten Start merken

Gespeicherte Daten löschen

Urin Anzahl		Urin gesamt ml		Wasser Uhrzeit		Wasser ml		Wasser gesamt ml		Hinweise
ml				07:00	300 ml					Demo-Hinweis: kurzer Tageskommentar.
ml	4	870		11:30	250 ml					
ml				16:45	300 ml			1.050		
ml				21:20	200 ml					
ml				07:00	300 ml					Demo-Hinweis: weniger Urin am Vormittag.
ml	3	520		11:30	300 ml			1.200		
ml				16:45	300 ml					
ml				21:20	300 ml					
ml				07:00	300 ml					Demo-Hinweis: Eintrag wirkt nur als Beispiel.
ml				11:30	350 ml					
ml	6	1.670		16:45	300 ml			1.150		
ml				21:20	200 ml					
ml				07:00	300 ml					Demo-Hinweis: Werte dienen nur der Vorschau.
ml	4	1.080		11:30	250 ml			1.150		
ml				16:45	300 ml					
ml				21:20	300 ml					
ml				07:00	300 ml					Demo-Hinweis: keine echten Gesundheitsdaten.
ml	4	1.070		11:30	300 ml			1.100		
ml				16:45	300 ml					
ml				21:20	200 ml					
ml				06:50	200 ml			600		
ml	4	1.080		18:30	400 ml					

Register, Filter und Tagesansicht

3. Erster sinnvoller Start

Die App startet absichtlich leer. So bleiben vorhandene Daten anderer Personen oder anderer App-Varianten getrennt.

- 1. Oeffne UroBilanz. Solange keine Daten geladen sind, siehst du die Startansicht.
- 2. Waehle CSV laden und waehle eine Original-Urinote-CSV oder eine Tagesdaten-CSV.
- 3. Pruefe das Dashboard und wechsele bei Bedarf zu Tag oder Woche.
- 4. Aktiviere Daten merken nur, wenn die CSV auf diesem Geraet lokal gespeichert bleiben soll.
- 5. Sichere wichtige Staende regelmaessig ueber Backup.

CSV ergaenzen ist nur fuer eine weitere Original-Urinote-CSV gedacht. Eine Tagesdaten-CSV ist ein Exportformat und kann nicht als Ergaenzung verwendet werden.


The screenshot shows the UroBilanz web application interface. A modal window titled "Eintrag hinzufügen" (Add entry) is open, allowing for manual data entry. The modal contains fields for "Datum" (Date) set to 30.05.2026 and "Urin Uhrzeit" (Urine time) set to 08:10. Below these, there are input fields for "Urin ml" (250) and "Wasser ml" (300). A "Wasser Uhrzeit" (Water time) field is also present, set to 08:30. A "Tagesnotiz / Hinweis" (Daily note / Note) field contains a demo message. At the bottom of the modal are buttons for "Schließen" (Close), "Neu" (New), "Hinzufügen" (Add), and "Hinzufügen & schließen" (Add & close). The background shows a calendar view for May 2026 with a table of entries for each day, including urine and water intake volumes and times.

Manuelle Eingabe in der Web-App

4. Eintraege erfassen und verwalten

Mit Eintrag oeffnest du die manuelle Eingabe. Datum und Uhrzeit bestimmen, welchem Messtag eine Angabe zugeordnet wird. Trage mindestens einen Urinwert, einen Wasserwert oder einen Hinweis ein. Mit Hinzufuegen bleibt der Dialog offen; mit Hinzufuegen & schliessen wird er danach geschlossen. Zuruecksetzen leert den Dialog. In der Tagesansicht kannst du einzelne Eintraege bearbeiten oder loeschen; Tag loeschen entfernt alle Eintraege dieses Messtags aus der lokalen Auswertung und aus kuenftigen Exporten.

- Urin ml und Wasser ml: Mengen bleiben getrennt; Wasser wird nicht zur Urinmenge addiert.
- Hinweis: sichtbarer Kontext, aber keine automatische medizinische Bewertung.
- Urin Hinweis: Ein Hinweis bei einem Urinwert bleibt an dessen Uhrzeit ausgerichtet.

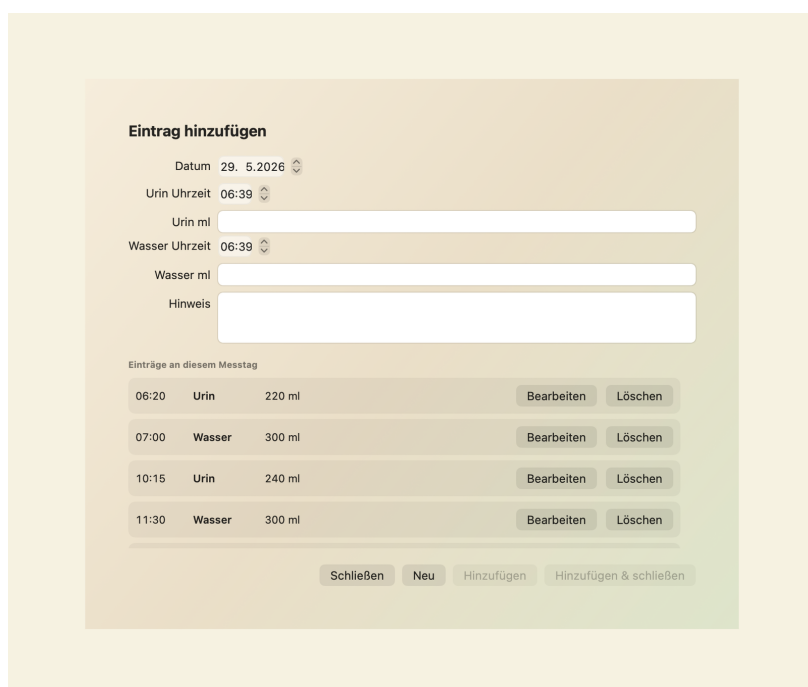

Eintrag hinzufügen

Datum 29. 5.2026

Urin Uhrzeit 06:39

Urin ml

Wasser Uhrzeit 06:39

Wasser ml

Hinweis

Einträge an diesem Messtag

06:20	Urin	220 ml	Bearbeiten	Löschen
07:00	Wasser	300 ml	Bearbeiten	Löschen
10:15	Urin	240 ml	Bearbeiten	Löschen
11:30	Wasser	300 ml	Bearbeiten	Löschen

Schließen Neu Hinzufügen Hinzufügen & schließen

Manuelle Eingabe in der macOS-App

5. Ansichten und Auswertungsregeln

Das Dashboard fasst den geladenen Zeitraum zusammen. Jahr, Monat und Woche verdichten dieselben Daten in Tabellen. Die Tagesansicht zeigt die einzelnen Zeiten, Mengen und Hinweise. Regeln erklärt die verwendete organisatorische Logik. Die Streak-Anzeige zählt aufeinanderfolgende Messtage mit Einträgen.

Regel	Bedeutung
Messtag	Laeuft von 06:00 bis 05:59. Eintraege von 00:00 bis 05:59 gehoeren zum Vortag; die Uhrzeit bleibt sichtbar.
Vollstaendig	Nur Tage mit mindestens acht Stunden zwischen erstem und letztem Urin- oder Wasserwert gehen in Summen, Durchschnitt und Bewertung ein.
Niedrig	Ein vollstaendiger Tag mit weniger als 700 ml Urin wird als niedrig gezeigt.
Normal	Ein vollstaendiger Tag ab 700 ml Urin wird als normal gezeigt.
Unvollstaendig	Randtage bleiben sichtbar, fliessen aber nicht in Summen, Durchschnitt oder niedrig/normal ein.
Wasser und Hinweise	Bleiben getrennt als Kontext sichtbar und veraendern keine Bewertung.

Die Kennzeichnungen niedrig, normal und unvollstaendig sind organisatorische Auswertungen. Sie sind keine Diagnose und ersetzen keine medizinische Beratung.

6. Bericht, Backups und Exporte

Oeffne Backup in der Werkzeugleiste und waehle das passende Format. Alle Dateien werden durch den Browser oder den macOS-Speicherdialog an einem von dir gewaehlten Ort gespeichert.

Option	Was sie lokal erstellt
Komplett-Backup	CSV mit allen Eintraegen im Originalformat fuer eine spaetere Wiederherstellung oder Kontrolle.
Tagesbackup	CSV mit zusammengefassten Messtagen fuer Austausch oder Archivierung.
JSON-Export	Strukturierter Export der Eintraege fuer eine eigene lokale Weiterverarbeitung.
Arztbericht	Druckfreundlicher Bericht mit Zeitraum, Zusammenfassung, Tagesverlauf und optionalen Tagesdetails sowie Hinweisen.

Beim Arztbericht waehle zuerst den Zeitraum. Tagesdetails und Hinweise sind eigene Schalter: Lass sie aus, wenn sie fuer den vorgesehenen Zweck nicht benoetigt werden.

Teile exportierte Dateien nur bewusst. Ein Export kann die von dir protokollierten Inhalte enthalten.

7. Themes, Sprache und Einstellungen

Das Theme-Menue oben rechts wechselt zwischen eingebauten Themes. Theme importieren liest eine eigene lokale JSON-Theme-Datei ein. Theme exportieren erzeugt eine bearbeitbare lokale Kopie des aktuellen Themes. Theme loeschen ist nur fuer importierte Themes aktiv; eingebaute Themes bleiben erhalten. Die Sprachwahl DE/EN aendert alle sichtbaren Texte einschliesslich der Erststart-Hilfe. In der macOS-App findest du unter Einstellungen zusaetzlich die Update-Pruefung; sie wird bewusst gestartet und prueft nur die oeffentliche Release-Information.

- Daten merken: speichert die aktuell geladene CSV lokal fuer den naechsten Start.
- Gespeicherte Daten loeschen: entfernt diese lokale Merkliste; die urspruengliche Datei ausserhalb der App bleibt unveraendert.
- Ueber UroBilanz: zeigt Version, Lizenz, Projektseite und Kontakt.

8. Datenschutz, KI-Hilfe und Fehlerberichte

UroBilanz verarbeitet Messdaten lokal. Es gibt keinen Cloud-Sync und keinen Daten-Backend-Dienst. Die sichtbaren GitHub-, Discord-, Lizenz- und Kontaktlinks oeffnen erst nach einem Klick. Fehler melden erzeugt einen pruefbaren Textentwurf; CSV-Werte, Hinweise und Gesundheitsdaten werden nicht automatisch hinzugefuegt.

In der leeren Startansicht kannst du das Handbuch oeffnen oder ChatGPT, Google Gemini oder Claude auswaehlen. Erst dein Klick kopiert eine feste allgemeine Frage mit diesem oeffentlichen Handbuch-Link in die Zwischenablage und oeffnet den jeweiligen Dienst. Die App uebergibt dabei keine Eintraege, Messwerte, Dateipfade oder gespeicherten Daten. Fuege die Frage nur selbst mit Cmd+V ein und sende sie nur, wenn du das moechtest.

Bei Beschwerden, Unsicherheit oder Veraenderungen deines Gesundheitszustands hole medizinischen Rat ein. Dieses Handbuch und die App ersetzen keine fachliche Beratung.